








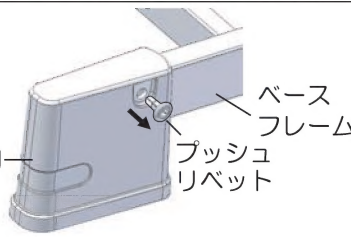
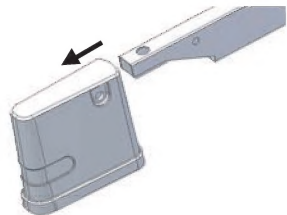
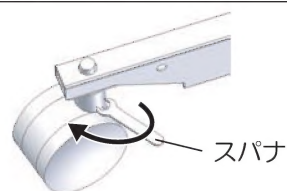


この度は、Miolet フォーユー キャスターセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。不足部品が無いが、梱包内容をお確かめください。

● 梱包内容

 キャスター ストッパー付き：2 個	 キャスター ストッパー無し：2 個	 キャップ：4 個	 プッシュリベット：4 個
 スパナ：1 本	 保証書：1 枚	 本書：1 枚	

● ベースフレームへのキャップとキャスターの取り付け方

※必ず、ベースフレームのみの状態で取り付けをおこなってください。ストッパー付きキャスターとストッパー無しキャスターは、ベースフレームにそれぞれ対角側に取り付けてください。

①  固定脚の プッシュ リベット 固定脚の外側のプッシュリベットを抜いてください。	②  固定脚をベースフレームから外してください。	③  付属のスパナでベースフレームの穴に、キャスターを取り付けてください。
④  キャップ キャップを横からはめて、キャップの穴に外側からプッシュリベットを挿してベースフレームに取り付けてください。	⑤  同様に、4 箇所に 取り付けてください。	

⚠ 警告

キャップとキャスターを取り付けの際は、ベッドを組み立てた状態でおこなわないでください。また、ベースフレームを立てて取り付ける場合はベースフレームが倒れないように注意してください。

ストッパー付きのキャスターが対角線になるように取り付けてください。

キャスターの取り付け完了後、ベースフレームを正常な状態に戻しキャスターをロックしてください。

ベッドを移動するとき以外は、ストッパーを踏み込んでロックしてください。

キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検してください。

○点検 / お手入れ

- ・キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検をしてください。
- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- ・製品に水を散らしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、ご使用しないでください。



フリーアクセス
携帯・PHS・OK

— 商品に関してのお問合せは下記へ —

0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
《土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く》

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑 2 丁目 8-39

12.12月作成

TS121231